

Erste Inbetriebnahme Otiom Ortungs-Lösung:

Diese Schnellstart-Anleitung hilft Ihnen dabei, Ihr Otiom-Startpaket zu installieren.

Bevor Sie beginnen empfehlen wir, unsere Videoanleitungen unter www.otiom.com/install anzusehen.

Sie müssen alle Schritte der Anleitung ausführen, damit Ihr Otiom korrekt funktioniert!

- ➔ **Otiom ist erst dann einsatzbereit, wenn Sie eine Meldung erhalten, die Sie darüber informiert, dass das Gerät aktiviert und einsatzbereit ist!**

1. Otiom-App installieren und öffnen



Apple iOS App



Android App

Laden Sie die Otiom App aus Ihrem App-Store.

Achtung: Wenn Sie gefragt werden, ob Otiom Ihren Standort verwenden darf, bestätigen Sie „Ja/ Immer zulassen / Beim Verwenden der App zulassen“. Bestätigen Sie außerdem, dass Otiom Bluetooth verwenden darf. Wenn Sie diese beiden Punkte nicht bestätigen, wird Otiom nicht funktionieren.


2. Benutzerkonto erstellen

Nachdem Sie die App installiert haben, erstellen Sie sich ein Benutzerkonto.

Anschließend erhalten Sie eine E-Mail mit Ihrem Passwort.

3. Otiom einrichten

- Loggen Sie sich mit den Zugangsdaten aus der E-Mail in der Otiom-App ein und folgen den Anweisungen in der App.
- Kontrollieren Sie, ob die Bluetooth-Verbindung eingeschaltet ist und Ihr Smartphone/Tablet Zugang zum Internet hat.
- Kontrollieren Sie, ob sich Google Maps auf Ihrem Smartphone/Tablet befindet, wenn nicht, laden Sie die App Google Maps herunter und installieren sie. Sie finden die App im App Store oder bei Google Play.

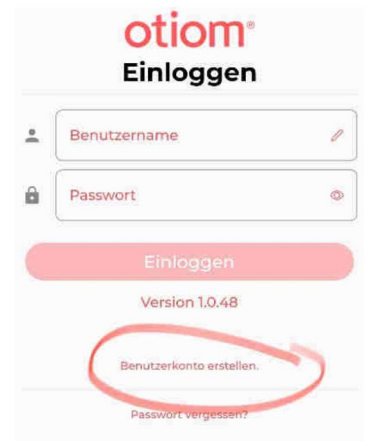

4. Persönliche Einstellungen

Sie können in der App verschiedene Alarmstufen auswählen, also bestimmen unter welchen Bedingungen Ihr Otiom alarmieren soll.

Die Anleitung unterstützt Sie dabei, Otiom auf Ihre Bedürfnisse anzupassen. Wenn Sie sich nicht mit den verschiedenen Einstellungen beschäftigen, könnte es sein, dass das Gerät nicht optimal funktioniert. Daher ist es wichtig, dass Sie die Einstellungen an Ihren Alltag anpassen.

Zum Testen und für die erste Inbetriebnahme empfehlen wir mit Stufe 6 zu starten.

Detaillierte Installationsanleitung

Es ist wichtig, dass Sie alle Schritte in der Anleitung ausführen, damit Sie sichergehen können, dass Ihr Otiom korrekt funktioniert. Halten Sie sich an die Anweisungen in der App/das Handbuch, auch wenn Sie in der Installation technischer Produkte geübt sind.

Otiom ist erst dann einsatzbereit, wenn Sie eine Nachricht erhalten, dass Otiom aktiviert und voll betriebsbereit ist!

Die komplette Anleitung finden Sie unter: <https://otiom.com/install>



Positionsanzeige am PC/Laptop

Sie können sich Ihre Einstellungen, Systeminformationen und die Position der zu betreuenden Person am PC/Tablet/Laptop anzeigen lassen.

Die Erst-Einrichtung Ihres Otiom-System erfolgt immer in der Smartphone App.

Bitte öffnen Sie die Seite <https://app.otiom.com/login> im Browser und loggen sich mit Ihren Zugangsdaten ein.

